


# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR PARAFINBAD 2041

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Für einen einwandfreien und sicheren Gebrauch lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Behandlungsbeginn. Wenn Sie diese Anleitung ausführlich studiert haben, können Sie die hervorragende Leistung und operative Methode des Gerätes im vollen Umfang genießen.

## 1 Einführung

Die Wachs-Therapie wird bevorzugt in Kosmetikstudios und Schönheitssalon eingesetzt, eignet sich aber auch, dank ihrer bemerkenswerten Wirkung und einfacher Bedienen, für den Gebrauch in einem normalen Haushalt. Die hat positive Auswirkungen auf trockene oder alternde Haut, besonders in den Herbst- oder Wintersaison. Die Wachs-therapie wird als "Crystal Mask" oder als Wachsmaske bezeichnet. Ihre wichtigste Funktion ist die Förderung der Durchblutung und des Wasserkreislaufs in den Hautzellen, sowie die Verbessert des Hautstoffwechsels. Außerdem verhilft die Wachs-therapie zu einer gründlichen Porenreinigung sowie zur Entfernung von altersspezifischen Verhornungen und trockenen und abgestorbenen Hautzellen. Dadurch verjüngt die Behandlung mit einer Wachsmaske die Haut, verbessert ihre Farbe und macht sie glatt und glänzend.

## 2 Beschreibung des Bedienfeldes und der Anschlüsse

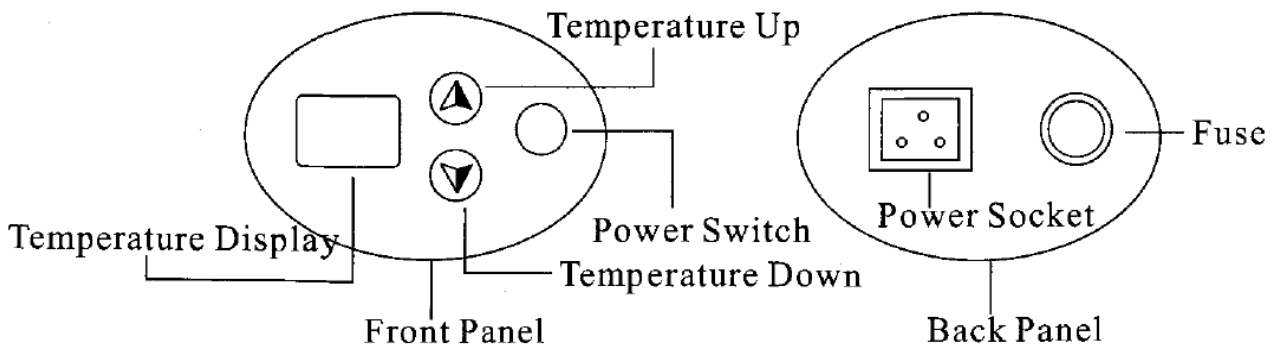

## 3 Nutzung des Gerätes

1. Stecken Sie ein Ende des Stromkabels in den Stromkabelanschluss auf der Rückseite des Gerätes und schließen Sie das andere Ende mit dem Netzstecker an eine geerdete Steckdose an, die den technischen Spezifikationen des Gerätes entspricht (siehe Absatz „Technische Daten“).
2. Drücken Sie den Netzschalter, dann ist das Gerät eingeschaltet (die voreingestellte Temperatur beträgt 50°C) und beginnt zu arbeiten.
3. Zum Aufheizen stellen Sie die Temperatur auf 65°C ein; nachdem das kosmetische Wachs vollständig geschmolzen ist, die Temperatur auf 55°C einstellen; das Gerät kann verwendet werden, nachdem die Wachs-temperatur auf 45-55°C gesunken ist und in diesem Bereich bleibt.
4. Das Gerät ist mit einer automatischen Temperaturhaltefunktion ausgestattet und kann eine eingestellte Wunschtemperatur konstant halten.

## 4 Warnhinweise

1. Vor dem Auftragen des flüssigen Wachses auf die Hautoberfläche muss Kosmetiker ein wenig Wachs auf die Handgelenkrückseite aufstreichen, um sicherzustellen, dass die Temperatur von Wachs für die zu behandelnde Person geeignet ist. Dadurch werden mögliche Brandschäden vermieden.
2. Die Wachs-therapie darf nicht auf einer verwundeten oder beschädigten Haut angewandt werden.
3. Die Wachs-therapie darf nicht bei Akne auf der Hautoberfläche angewandt werden.
4. Bitte schalten Sie den Strom nach Beendigung der Behandlung aus. Schalten Sie den Strom wieder ein, erst wenn das Wachs vollständig verfestigt ist. Gießen Sie nicht das Wachs, bis es komplett unter der sichtbaren Oberfläche geschmolzen ist. Gießen Sie das Wachs nicht direkt nachdem es

geschmolzen ist.

- Die Menge des heißen Waxes im inneren Gerätetopf sollte ca. das halbe Topfvolumen füllen.

## 5 **Behandlungsablauf**

### Professionelle Gesichtspflege:

- Das Gesicht waschen und den Zustand der Haut vor der Behandlung analysieren.
- Gesicht für einige Minuten bedampfen, reiben Massagelotion auf das Gesicht auf und massieren Sie es für etwa fünf Minuten, dann entfernen Sie die Lotion.
- Eine Pflegelotion auftragen.
- Die Wachsmaske auf die Pflegelotion auftragen, wenn die Wachs-temperatur passend ist (vorher auf der Handgelenkrückseite testen).

### Professionelle Handpflege:

- Waschen Sie die Hände und entfernen Sie den Schmuck von den Händen. Testen Sie die maximale Temperatur vorsichtig mit Ihrem Finger.
- Die Finger ausbreiten, in das flüssige Wachs für 2-3 Sekunden eintauchen, dann die Finger herausnehmen.
- Wiederholen Sie diese Operation für 4-6-mal. Dabei werden die Hände zu einer dicken Wachsmaske verfestigt.
- Wickeln Sie die Hände sofort in die Handschuhe ein. So kann die Temperatur aufrechterhalten und die Nährstoffe von den Poren absorbiert werden.
- Nach 15-20 Minuten entfernen Sie die Handschuhe, entfernen Sie dann die Wachsmaske und das restliche Fett von den Fingern. Die Hände werden zart und glatt.

### Professionelle Fußpflege:

- Waschen Sie die Füße. Testen Sie die maximale Temperatur vorsichtig mit Ihrem Finger.
- Die Füße für 2-3 Sekunden in das flüssige Wachs eintauchen und herausnehmen. (Tragen Sie das Wachs auf die Füße mit einer Bürste/Pinsel, wenn die Füße nicht in den Gerätetopf eingetaucht werden können.)
- Wiederholen Sie diese Prozedur 4-6-mal. Dabei werden die Füße zu einer dicken Wachsmaske verfestigt.
- Wickeln Sie die Füße sofort in die Tasche ein. So kann die Temperatur aufrechterhalten und die Haut kann vollständig erwärmt werden.
- Nach 15-20 Minuten entfernen Sie die Tasche, entfernen Sie dann die Wachsmaske und das restliche Fett von den Zehen und Fußnägeln. Die Füße werden zart und weich.

## 6 **Technische Daten**

<b>Betriebsspannung</b>	220 – 240 V
<b>Frequenz</b>	50 – 60 Hz
<b>Leistung</b>	165 Watt

**Achtung:** Diese Anleitung stellt die Grundlage für einen Ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch **nur für das oben beschriebene Gerät** dar.

**Achtung:** Bitte vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Gerätes mit der Netzspannung in der Steckdose übereinstimmt.

**Achtung:** Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren oder es würde im Laufe der Nutzung zu Ausfällen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, Hersteller oder an eine zertifizierte Servicestelle. Das Gerät darf nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder anderen qualifizierten Fachperson geöffnet bzw. auseinanderggebaut werden.